

# AS608 / AS608e Screening- Audiometer

---

Tragbares  
Screening- Audiometer



  
**Interacoustics**

---

# Tragbar und einfach in der Anwendung

---

Das tragbare Audiometer AS6o8 / AS6o8e eignet sich ideal für die Verwendung an Schulen, in der Industrie und in Arztpraxen und überall dort, wo schnelle Hörtests durchgeführt werden müssen. Durch die leichte Handhabung ist nur eine minimale Einführung vor der Inbetriebnahme erforderlich. Das Gerät verfügt über einen kalibrierten Rein-, Wobbel- und Pulston. Diese Stimuli werden über einen großen Frequenzbereich angeboten.

---

## Tragbar

Das AS6o8 / AS6o8e umfasst eine leichte Tragetasche mit Schultertrageriemen, in der das AS6o8 / AS6o8e, die Kopfhörer sowie die Audiogramm-Formulare untergebracht werden können.

---

## Batterien oder Stromversorgung

Das AS6o8 / AS6o8e kann entweder mit 3 Standard-AA-Batterien oder über eine medizinisch zugelassene externe Stromversorgung betrieben werden. Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie beträgt sechs Monate.



Tragetasche AS6o8



Diagnostik Suite Software (nur AS6o8e)

---

## PC-Anbindung (nur AS6o8e)

Das AS6o8e ermöglicht die Anbindung an einen PC. Mit Hilfe eines USB-Kabels und der Diagnostik Suite Windows® Software werden die Daten auf den PC übertragen.


Die Diagnostik Suite bietet folgende Funktionen:

- Erstellung eigener Druckvorlagen (Print Wizard)
- Übersichtliche Berichtsseite
- Einfache Benutzeroberfläche
- Datenbanken: OtoAccess™ und Noah


---

## Automatischer Hörtest (nur AS6o8e)

Das AS6o8e enthält die automatische Hörschwellaudiometrie nach Hughson Westlake. Ist die Hörschwelle erstellt, werden die Daten des Test einfach aus dem internen Speicher ausgelesen und mit Hilfe der Diagnostik Suite PC Software dargestellt, ausgedruckt und archiviert.

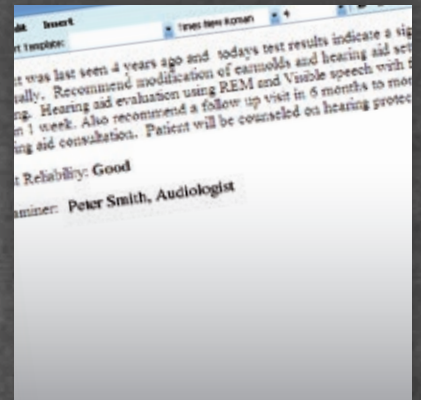

Bericht-Ansicht der Diagnostik Suite (nur AS608e)

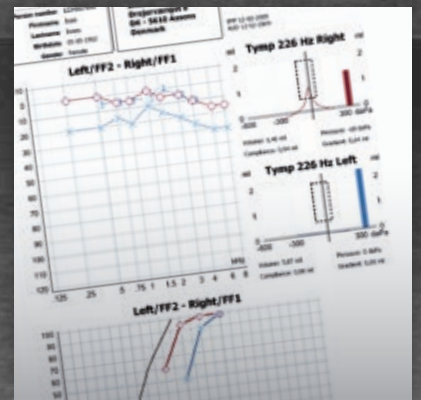

Druck-Ansicht der Diagnostik Suite (nur AS608e)

## Merkmale

- Robuste Konstruktion
- 11 Frequenzen zwischen 125 Hz und 8 kHz
- Patientenspezifische Frequenztest-Auswahl
- Ausgabepegel zwischen -10 dB und 100 dB HL
- Reinton, Wobbelton und Pulston
- Leiser Stimulusschalter
- Batteriestatusanzeige
- Tragetasche
- Patiententaste (nur AS608e)
- Externe Stromversorgung (optional)
- Kopfhörer mit Schallschutzkappen (optional)
- Ansprechfunktion (nur AS608e)
- PC-Anbindung (nur AS608e)
- Automatische Audiometrie nach Hughson Westlake (nur AS608e)

Tragbar (das  
Gesamtgewicht  
liegt unter  
1,6 kg)





## Interacoustics

Interacoustics ist ein weltweit führender Anbieter von Diagnostikgeräten und Systemlösungen im Bereich der Hör- und Gleichgewichtsuntersuchungen.

Durch kontinuierliche Entwicklungen und ständigen Fokus auf Integration unterstützen wir Neurootologen und Audiologen mit passenden Werkzeugen um die Befundung und Diagnose zu erleichtern.

---

## Wir stehen Ihnen stets zur Seite

Wann immer Sie ein Diagnostiksystem der Marke Interacoustics erwerben, können Sie sich der Qualität des Produktes gewiss sein. Weltweit sind wir in über 100 Ländern vertreten. Mit einem sorgfältig ausgewählten Netzwerk aus Händlern und Kundendienstzentren gewährleisten wir, dass sie jederzeit eine zuverlässige Unterstützung durch unser hochausgebildetes Support- und Servicepersonal erhalten.

---

## Produktdaten

Alle technischen und Hardware-Spezifikationen für das AS608 können von unserer Website heruntergeladen werden.

**Erfahren Sie mehr unter  
[interacoustics.com](http://interacoustics.com)**

---

## Interacoustics

Audiometer Allé 1  
5500 Middelfart  
Dänemark

T +45 6371 3555

F +45 6371 3522

[info@interacoustics.com](mailto:info@interacoustics.com)  
[interacoustics.com](http://interacoustics.com)

Unser  
vollständiges  
Produktangebot  
finden Sie  
online



**Interacoustics**